



- Sterilt desinfeksjonsmiddel med sporedrepende effekt & kort virketid
- Garantert steril «in-use» inntil 3 mnd
- Etterlater minimalt med rester
- Tripplemballert for enkel innslusing
- Endotoksin-nivå < 0,25 EU/ml
- Water for Injection (WFI)
- Velegnet for rotasjon
- Korroderer ikke på stål

Klercide™ Sporicidal Low Residue

Peroxide DI inneholder 6 % hydrogenperoksid blandet med deionisert (DI) vann. Biocidblandingen er filtrert 0,2 micron, sterilt fylt under laminærstrøm EU GMP Klasse A og tripplemballert i et EU GMP Klasse B renrom. Produktet etterlater minimalt med rester og trenger ikke fjernes etter påføring.

Bruk: Daglig desinfisering av større og mindre overflater. Som ledd i innslusing for å forhindre overføring av sporer eller andre mikroorganismer.

Virkning: Dreper bakterier, virus, sopp og sporer.

Kompatibilitet: Kompatibel med et stort utvalg renromsoverflater samt Klercide- og Klerwipe-seriene.

Forpakning:

- 1 L SDS-sprayflaske
- 5 L kanne med skrukork.

ART. NR.	STR.	MINSTE FORPAKN.	ANTALL I KARTONG
EC6600537	1 L Spray	1 L	6 x 1 L
EC6600545	5 L Kanne	5 L	4 x 5 L


Produsert av et ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert selskap under EU GMP.

SteriShield Delivery System:

Sprayflasken inneholder det patenterte SteriShield Delivery System (SDS) som sikrer at innholdets sterilitet opprettholdes under bruk. Dokumentert sterilt inntil 3 måneder etter åpning.



Vi kan ultra-renhet!

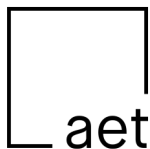

EFFEKTIVITET

BAKTERIER	SOPP	VIRUS	SPORER
EN 1276	EN 13697	EN 14476	EN 13704
EN 13697	EN 1650		EN 16615
EN 16615	EN 16615		

Vi kan ultra-renhet!